



Unisol W

Gebrauchsanweisung



Produktbeschreibung

Zusatzmittel zur verbesserten Wachslösung für die Anwendung in Ausbrühgeräten (nicht schäumend, nicht emulgierend).

Dosierung

Entsprechend der Wasserfüllmenge des Ausbrühgerätes wird Unisol W als 1 %-ige Konzentration dosiert (z. B. 500 ml auf 50 l Wasser).

Verwendung

Unisol W dem kalten Wasserbad zugeben und wie gewohnt aufheizen. Sprühfunktion des Ausbrühgerätes erst nach Erreichen der Arbeitstemperatur aktivieren!

Enthält: Nichtionische Tenside, Konservierungs- und Stellmittel, Farbstoff

Lieferform:

REF D4392 2 x 1 l-Flasche

REF D4393 5 l-Kanister

Unisol W ist beim Umweltbundesamt (UBA) nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) unter der UBA: 5062 0004 zugelassen.

Mögliche Gefahren

Beachten Sie bei der Benutzung von Unisol W das Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Chargennummer / Haltbarkeitsdatum: Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich auf jeder Unisol W Verpackung. Bei Beanstandungen des Produktes bitte immer die Chargennummer des Produktes angeben. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums.

Die Dreve Dentamid GmbH haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung des Materials hervorgerufen werden.

2018-07-19 / Rev. 1
Dreve Dentamid GmbH • Max-Planck-Str. 31, 59423 Unna / Germany
Tel.: ++49 2303 8807-0 • Fax: ++49 2303 8807-55
dentamid@dreve.de • www.dreve.com



ACHTUNG



Unisol W

Directions for use



Product Description

Additive for the improved wax-solving for the use in boiling-out units (non-foaming, non-emulsifying).

Dosage

According to the water filling quantity of the boiling-out unit Unisol W is dosed as 1 % concentration (e.g. 500 ml to 50 ltr. water).

Field of Application

Add Unisol W to the cold water bath and heat up as usual. Activate the spraying function of the boiling-out unit not until the working temperature is achieved!

Contents: Non-ionic surfactants, preservatives, dyestuff

Available size

REF D4392 2 x 1 ltr. bottle

REF D4393 5 ltr. canister

Unisol W is admitted by the Umweltbundesamt "Federal Agency for Environment" according to the Wasch- und Reinigungsmittelgesetz „guideline for washing and cleaning agents" UBA: 5062 0004.

Possible dangers

Before use observe the Material Safety Data Sheet of Unisol W.

Hazard statements

H319 Causes serious eye irritation.

Precautionary statements


P280 Wear eye protection / face protection. P264 Wash thoroughly after handling.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Lot number / Expiry date: The lot number and the best before date are indicated on each Unisol W packaging. In case of claims please always indicate the lot number of the product. Do not use the product after expiry date.

Dreve Dentamid GmbH is not liable for any damages caused by improper application of the material.

2018-07-19 / Rev. 1
Dreve Dentamid GmbH • Max-Planck-Str. 31, 59423 Unna / Germany
Tel.: ++49 2303 8807-0 • Fax: ++49 2303 8807-55
dentamid@dreve.de • www.dreve.com

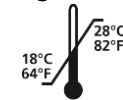

WARNING